


TWIST LANCETS 30G NIPRO




DESCRIPCION:

Las lancetas estériles desechables son dispositivos compuestos por una aguja, cuerpo principal y tapa protectora, que están diseñadas para recolectar micro muestras de sangre mediante punción en la yema del dedo. Las lancetas tienen las tapas protectoras giratorias (Twist Lancets), vienen en diferentes calibres de punta de punción (gauge) y se utilizan junto a un dispositivo de punción.

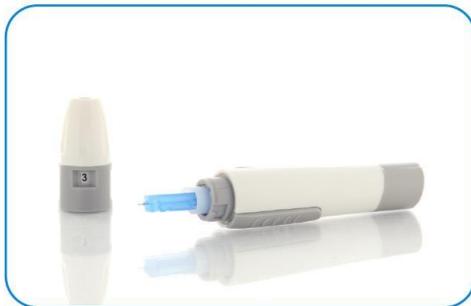


CARACTERISTICAS:

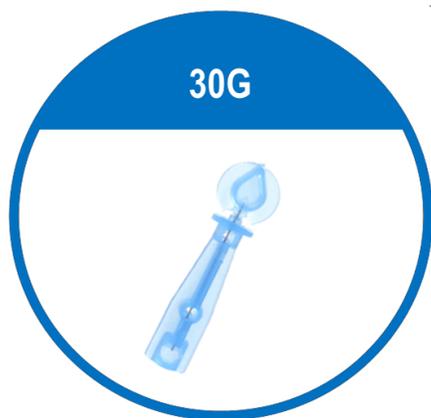

-  Aguja Tribiselada, 30G
-  Compatible con todo tipo de lancetero
-  Tapa protectora giratoria

CARACTERISTICAS DIFERENCIADAS POR CODIGO:

Nº	Código	Longitud total (L1)	Longitud del mango de plástico (L2)	Parte expuesta de la punta de la aguja (L3)	Ancho del mango de plástico (W)	Diámetro de las agujas de extracción de sangre	Gauge	Color
1	DK-LANCET26100	32±1.5mm	22.9±0.3mm	3.2±0.3mm	6.4±0.3mm	0.46±0.01mm	26G	Azul claro
2	DK-LANCET28100	32±1.5mm	22.9±0.3mm	3.2±0.3mm	6.4±0.3mm	0.36±0.01mm	28G	Azul transparente
3	DK-LANCET30100	32±1.5mm	22.9±0.3mm	3.2±0.3mm	6.4±0.3mm	0.31±0.01mm	30G	Azul transparente
4	DK-LANCET33100	32±1.5mm	22.9±0.3mm	3.2±0.3mm	6.4±0.3mm	0.21±0.01mm	33G	Blanco transparente

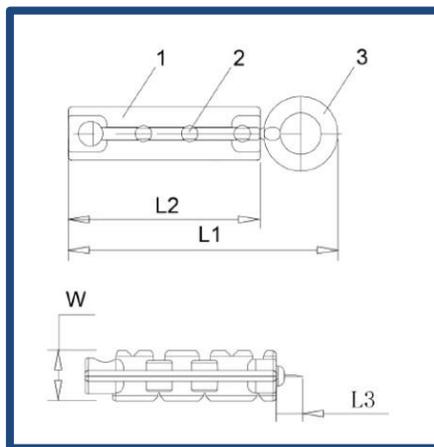

MATERIALES:



PARTES	MATERIAL
Aguja	Acero inoxidable SUS304
Cuerpo principal	Polietileno de baja densidad
Tapa protectora	Polietileno de baja densidad

PUNCIÓN:

Profundidad de punción, usando el lancetero:

- Posición 1: 0.7 mm \pm 0.25 mm (piel delicada/delgada)
- Posición 2: 0.9 mm \pm 0.25 mm (piel delicada/delgada)
- Posición 3: 1.3 mm \pm 0.25 mm (piel normal)
- Posición 4: 1.7 mm \pm 0.25 mm (piel normal)
- Posición 5: 1.9 mm \pm 0.25 mm (piel gruesa con callosidades)

Profundidad de punción, sin usar lancetero:

- Variable: entre 1.5 mm \pm 0.65 mm

INDICACIONES:

- Para uso profesional en entidades de salud.
- Extracción de sangre capilar.

MÉTODO DE ESTERILIZACIÓN:

- Esterilización Radiación gamma, según la norma ISO 11137

TIEMPO DE VIDA ÚTIL:

- 5 años, después de su fabricación.

FORMA DE PRESENTACION:

- Caja de cartón grado medico por 100 unidades

PROCEDENCIA:

- Elaborado por **TIANJIN HUAHONG TECHNOLOGY CO LTD**, bajo estándares USA.

REGISTRO SANITARIO VIGENTE:

- DM19587E