

FICHA TÉCNICA
CATÉTER TRAQUEAL DE SUCCIÓN

1.- PRODUCTO: CATÉTER DE SUCCIÓN.

2.- MARCA COMERCIAL: NIPRO

3.- FABRICANTE Y ORIGEN : JIANGSU WEIKANG JIEJING MEDICAL APPARATUS CO.,
 LTD. - CHINA

4.- REGISTRO SANITARIO: DM18174E


DISPOSITIVO MÉDICO EXTRANJERO			
REGISTRO SANITARIO	VIGENCIA	NOMBRE COMÚN	NOMBRE DEL DISPOSITIVO MÉDICO
DM18174E	Del: 28/11/2019 Al: 28/11/2024	CATÉTERES TRAQUEALES PARA SUCCIÓN	CATÉTER DE SUCCIÓN



DESCRIPCIÓN

EL CATÉTER DE SUCCIÓN, es un tubo largo y flexible de uso médico, para absorber el esputo del cuerpo humano y eliminar secreciones de las vías respiratorias, manteniéndolas libres y evitar el taponamiento. Compuesto por un catéter y un conector fabricado en PVC grado médico. El catéter de succión tiene por un extremo dos aperturas laterales de drenaje que, avanza por la vía aérea (tubo endotraqueal o traqueostomía) para aspirar las secreciones. Y en el otro extremo tiene el conector (son cuatro diferentes tipos de conectores que determinan el modelo) nueve especificaciones de acuerdo al tamaño del tubo: F6, F8, F10, F12, F14, F16 Y F18 y que son de colores (cumpliendo con el sistema de códigos internacionales).


5.- DETALLE DEL DISPOSITIVO MÉDICO

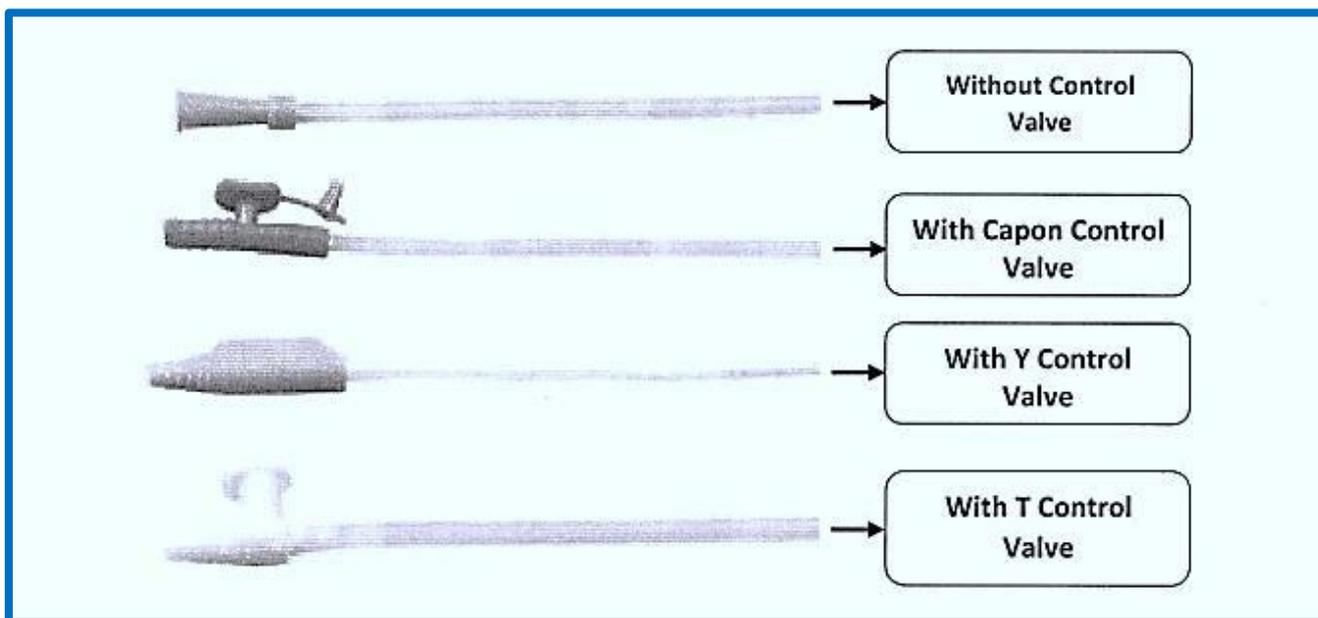


CÓDIGO DE MODELO	MODELO	TALLA	FORMA DE PRESENTACIÓN GENERAL
020231	WITHOUT CONTROL VALVE	F6, F8, F10, F12, F14, F16 Y F18	Blister de papel/polietileno grado médico. Contenido 1 unidad. Caja de cartón contenido 10, 20, 50 y 100 blister de papel/polietileno grado médico.
020231	WITH T CONTROL VALVE	F6, F8, F10, F12, F14, F16 Y F18	
020233	WITH CAPON CONTROL VALVE	F6, F8, F10, F12, F14, F16 Y F18	
020234	WITH Y CONTROL VALVE	F6, F8, F10, F12, F14, F16 Y F18	

MODELOS : DIBUJO TÉCNICO


Símbolo	Partes	Material
L	Tubo + Conector	PVC grado médico
L1	Conector	PVC grado médico

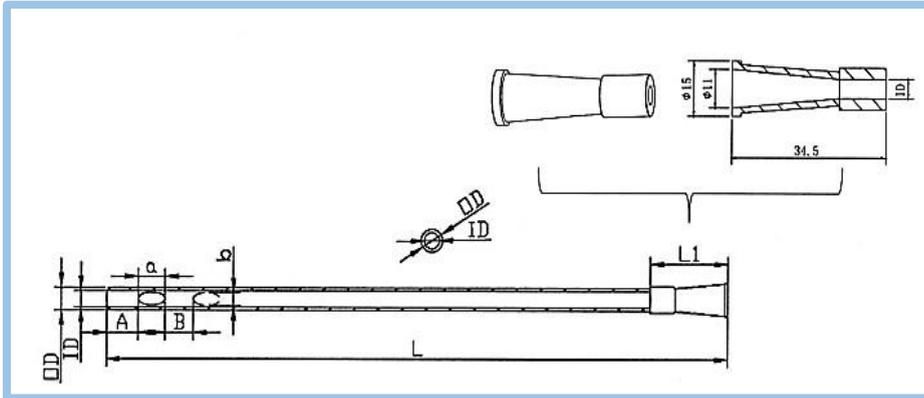


1.- WITHOUT
CONTROL
VALVE

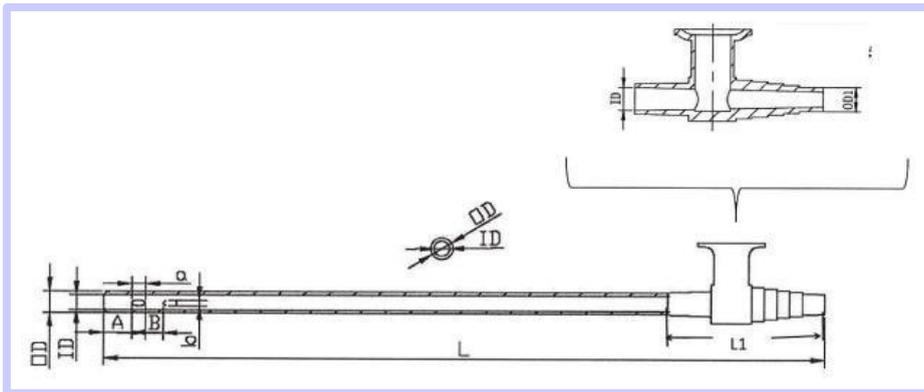

2.- WITHOUT
T CONTROL
VALVE

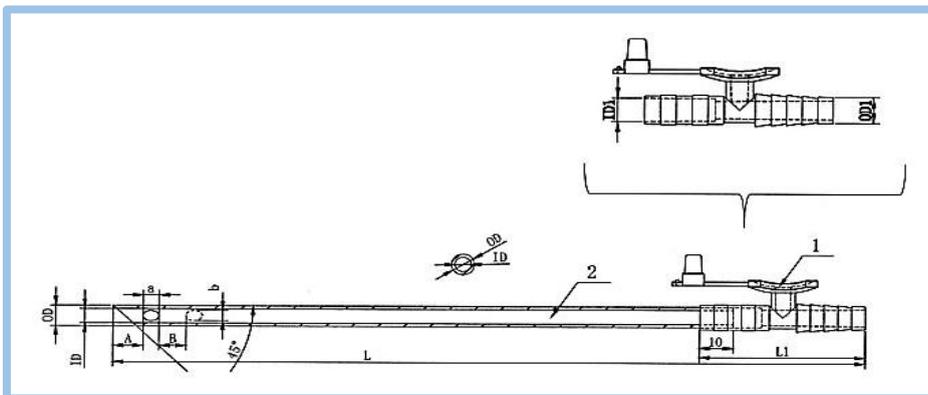

3.-WITHOUT
CAPON
CONTROL
VALVE

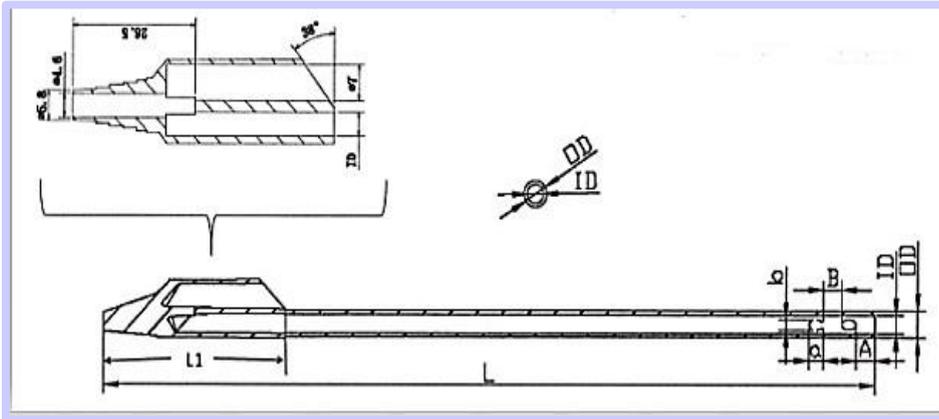

**4.-
WITHOUT
Y
CONTROL
VALVE**

CARACTERISTICAS GENERALES Y PRECAUCIONES

- Codificado por colores para visualizar el tamaño.
- Punta estándar, extremo redondeado distal para una introducción atraumática.
- Libre de DEHP.
- No citotóxico.
- No causa irritación, ni sensibilidad.
- El producto es de un solo uso y no debe usarse más que agua estéril para la lubricación.
- Usarse exclusivamente para succionar el esputo del cuerpo humano.
- El producto es estéril, use guantes para abrir el paquete. Es de un solo uso, Descártelo después de usarlo. No lo esterilice.

ESTERILIZADO: POR ÓXIDO DE ETILENO.

Condición biológica: Biocompatible, estéril y atóxico.

➤ **Cumple con las siguientes normas ISO:**

- EN ISO 88366
- EN ISO 11607 – 1
- EN ISO 15223
- EN 1618
- ISO 10993 – 5
- ISO 10993 - 7
- ISO 10993 – 10
- ISO 11135 - 1